


## スラットレグ ISR-2301

### 取扱説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

リチウムイオンバッテリー(LiB)搭載製品

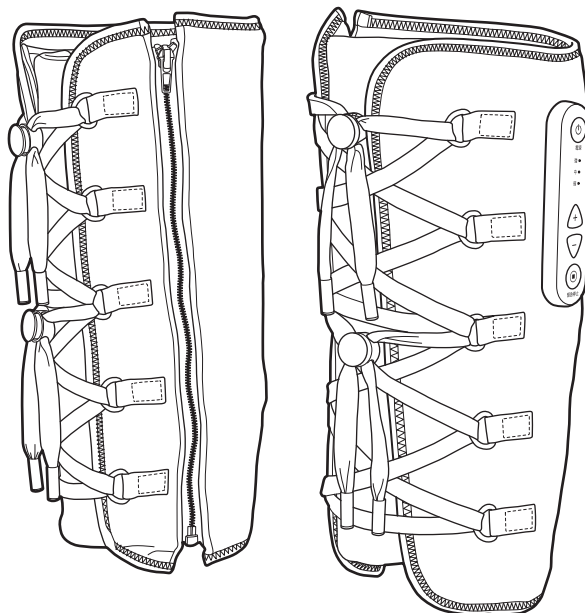



#### も く じ



安全上のご注意	..... P.1 ~ P.2	修理・サービスを依頼する前に	..... P.9
各部の名称とはたらき	..... P.3	仕様	..... P.10
正しい使いかた	..... P.4 ~ P.7	アフターサービスについて	..... 裏表紙
お手入れと保存	..... P.8	保証書	..... 裏表紙

# 安全上のご注意









- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





## 図記号の意味と例

	〇は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、〇の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)




# 警告

 指示	医師の治療を受けている人や、次のような人は必ず医師とご相談ください。 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人。 ●安静を必要とする人。 ●悪性腫瘍のある人。 ●心臓に障害のある人。 ●熱の高い人(38℃以上・有熱期)。(例:急性炎症症状倦怠(けんたい)感、悪寒、血圧変動などの強い時期。衰弱しているとき)。 ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性[疼痛(とうつう)性]疾患の人。 ●腱鞘炎がある人。 ●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 ●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。 ●背骨(脊椎)に異常のある人又は左右に曲がっている人。 ●特に身体に異常を感じているとき。 ●皮膚に創傷のある人。 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 ●温度感覚喪失が認められる人。 ●使用しても効果が現れない人。 ●その他医療機関で治療中の人。		
 禁止	次のような箇所・人には使用しないでください。 事故や症状を悪化させるおそれがあります。 ●医師からマッサージを禁じられている人。 例: 血栓塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)、など。 ●脚部に重度の血行障害のある人。 ●けい部(首)への使用はしない。		
 禁止	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	ACアダプターの刃やUSB-Cプラグの金属部等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。
ACアダプターに布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・感電の原因になります。	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 禁止	本体を火の中に投入したり、加熱しない。 火災や充電電池の破裂の原因になります。
充電用USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	炎天下の自動車車内など高温の場所に置かない。 火災や故障・充電電池の破裂の原因になります。	 禁止	充電電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。
USBプラグやUSB-C端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	機器は改造しない。 けがや感電・事故の原因になります。	 使用禁止	使用前にはカバーが破れていないかを確認する。また、そのほかの部分にも破れがないか確認する。もし破れがある場合には、どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼する。 布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。また本体の上で遊ばせない。乗らせない。 けが・感電やけなどの原因になります。	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源を切って、使用を停止し、コンセントからACアダプターを抜く。 火災・感電の原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセント、USB-CプラグはUSB-C端子、USBプラグはUSB端子の奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
			 プラグを抜く お手入れの際は、安全のため必ずUSB-Cプラグを抜く。 感電・火災・けがの原因になります。

# 警告


 プラグを抜く	充電しないときは、必ずUSB-Cプラグを抜く。ACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。	素肌や衣服が濡れている状態で使用しない。 けがや感電の原因になります。	布団やこたつの中、毛布をかぶせて使用しない。 内部の温度が上昇し、火災や事故、感電の原因になります。
 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。	浴室など湿気が多い場所では使用しない。 感電および故障の原因になります。	足のケアをする以外の目的に使用しない。 事故やけが、体調不良をおこすことがあります。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。	本体に乗って立ったり、歩いたり、勢いよく乗ったりしない。 けがや故障の原因になります。	足のケアをする部位にアクセサリ(装身具)を付けたまま使用しない。 けがや感電・事故の原因になります。
 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。アタッチメント以外、洗わない。ショート・感電の原因になります。	金属や燃えやすいものを近づけない。たばこを吸いながら使用したり、ストーブなどの火気の近くで使用したりしない。 感電やショート・火災の原因になります。	業務用として使用しない。

# 注意


 指示	USBケーブルはUSBプラグ部を持って抜き差しする。 USBケーブルを持って引き抜いたりすると接続部に無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。  1回の使用時間は10分以内にし、同一箇所への連続使用はさける。 逆効果やけがの原因になります。  使用中、からだに異常があらわれた場合は、ただちに使用をやめて、医師に相談する。 事故やけがの原因になります。  動かなくなったり、異常が感じられたときは、すぐに電源を切る。 USB-Cプラグを本体から抜く。 感電・漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。  異常に熱を持ったり、異音がするときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜く。 内部の故障、火災の原因になります。  毎回使用開始時は、必ず「弱」(弱い刺激)から使用する。 ケガの原因となります。  充電中に停電が起きた場合、すぐにUSB-Cプラグを本体から抜く。 停電から復旧するときに過大な電圧・電流がかかり、故障の原因となります。	 禁止	 禁止
		お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。  次のようなときは使用しない。 ・疲労が激しいとき。 ・酒に酔っているとき。 ・湿疹が生じているとき。 ・食前、食後(それぞれ1時間) 体調不良をおこすことがあります。  直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。 色あせ、熱による変形、故障の原因になります。  他の治療器具と一緒に使用しない。 事故やけが、体調不良を起こすおそれがあります。  炎症や傷のあるところに直接使用しない。 炎症や傷の悪化の原因になります。  ACアダプターは本品に付属しているもの以外は使わない。 故障の原因になります。	USBケーブルをねじれたまま使用しない、保存しない。 故障の原因になります。使用する前にねじれをなくしてから使用してください。  使用中は眠らない。 無意識での使用は、からだへの異常やけがの原因になります。  付属の充電用USBケーブルを巻き付けておかない。 断線などの原因になります。  落としたり、強い衝撃を与えない。 感電やショート、事故の原因になります。  車内で使用しない。 事故・故障の原因になります。

# 各部の名称とはたらき


## 表面

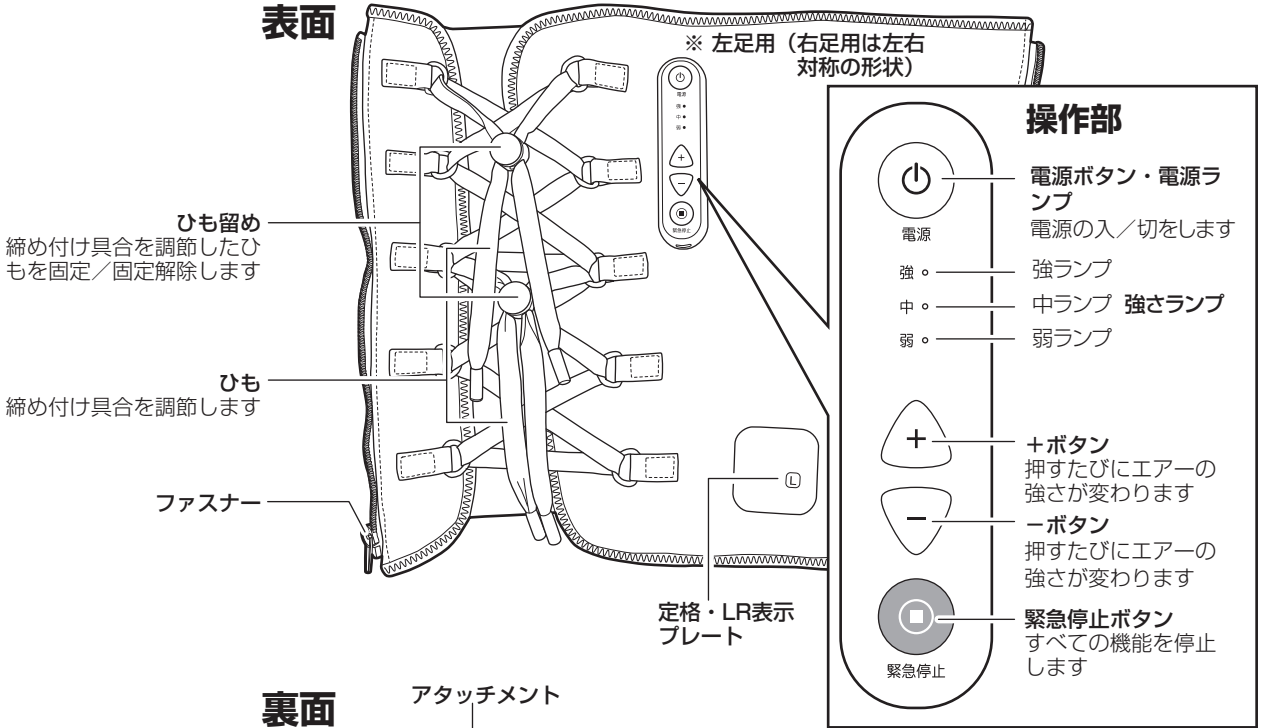

## 裏面

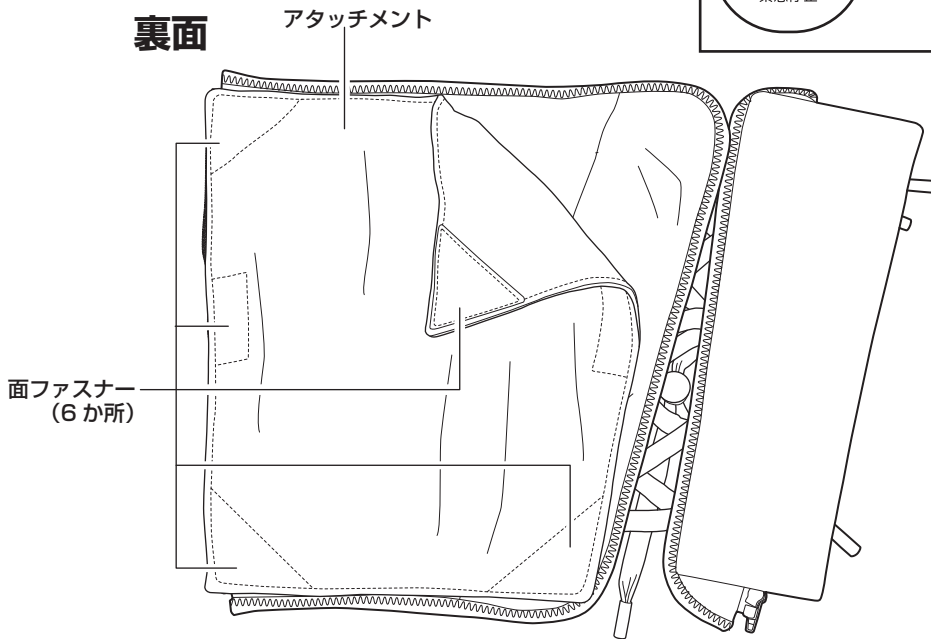

## 付属品

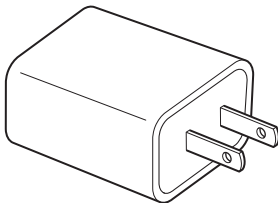


専用ACアダプター

専用ACアダプター定格表示内“==”の表示は、直流を示す記号です。

USBプラグ

USB-Cプラグ

USB-Cプラグ

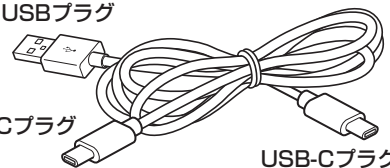

充電用USBケーブル

USB-Cプラグが2つあり、左右両方の本体を同時に充電することができます。

# 正しい使いかた



**警告**

- アタッチメントをはずして使用しない。
- 使用前には、必ず本体が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。
- もし、破れなどがある場合には、どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、絶対に使用しない。

## 使用前の準備



### 1. 一度ファスナーを開き、アタッチメントが確実に装着され、破れなどがないことを確認する

本体に破れを発見したときは絶対に使用しないでください。

### 2. 再度ファスナーを閉めて筒状に戻す

### 3. 専用ACアダプターに充電用のUSBケーブルを接続し、USB-Cプラグを本体のUSB-C端子に接続する

付属の充電用USBケーブルはUSB-Cプラグが2つあるので、それぞれ左右の本体に取り付けて同時に充電することができます。

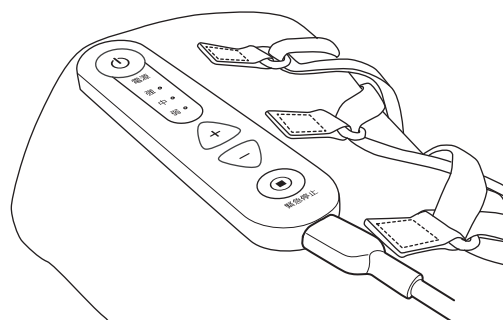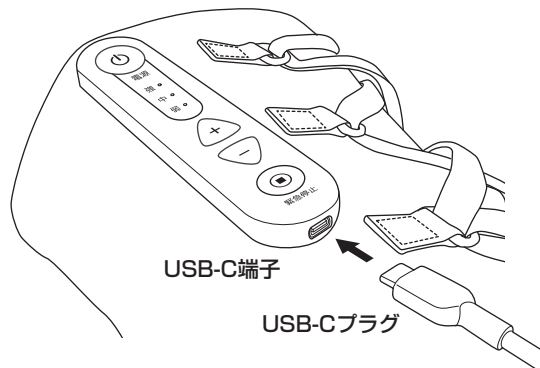

**警告**

ACアダプターは、コンセントの奥まで、USBプラグはACアダプターのUSB端子の奥まで、USB-Cプラグは本体側のUSB-C端子の奥までしっかりと差し込む。

### 4. 専用ACアダプターをコンセントに差し込む

充電用USBケーブルは、束ねたまま・巻きつけたまま使用しないでください。



**注意**

テレビ、ラジオなどから2m以上はなして設置する。  
雑音の原因になる場合があります。

### 5. 充電が開始される

充電中は3つの強さランプが順番に点滅します。充電が完了すると、3つの強さランプが点灯します。

- 左右とも、満充電まで充電をしてください。
- 満充電まで最大約4時間かかります（残量0状態から・室温25℃）

## 充電池について

充電池は消耗品です（消耗品のため保証対象外になります）。

- 内蔵充電池（リチウムイオン充電池）は、約300回の充放電ができますが、徐々に使用時間は短くなります。充電池寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により変化します。

- 約4時間充電しても、著しく使用時間が短くなったときは、充電池が寿命と考えられます。充電池は消耗品のため、初期不良以外は交換しかねます。

## 充電池の正しい使いかた

本機は本体に内蔵された充電池で動作します。使いかたを誤ると、充電池の寿命が大幅に短くなったり、充電池が破損することがあります。

以下をよくお読みになり、充電池を正しくお使いください。



**注意**

充電せずに放置しないでください。充電池切れのまま長時間放置すると充電池の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。

- 電源が切れていても充電池は少しずつ消費されます。
- 充電池が切れたときは早めに充電してください。

充電は中断しないでください。

強さランプがすべて点灯するまで中断せずに充電してください。

充電は室温が5℃以上、35℃以下のところで行なってください。

- 室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができませんことがあります。
- 運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。

# 正しい使いかた (つづき)

## 使いかた

1. 電源ボタン・強さボタン・緊急停止ボタン・タイマーが正しく動作するか確認する

初めて使用するときや、しばらく使用していなかった場合などは、機器が正常に、かつ安全に動作することを確認してください。

2. 電源を切った状態で、本体の左右を確認して本体を持つ

L: 左足用、R: 右足用となっています。

3. 右図のように本体の上から足を入れる  
本体を筒状のまま、足を入れてください。


4. 足がきつい場合や足が入らない場合は、ひもをゆるめて足を入れる

ひも留めを押してひもをゆるめます。

5. 足が入ったら、ひもを調節して足に合わせる



足のケアをしたい場所にあわせて、足の位置を上下させてください。

背面の定格・LR表示プレートをアキレス腱の位置に合わせることで、内部のエアバックの中心とふくらはぎの中心を合わせることができます。

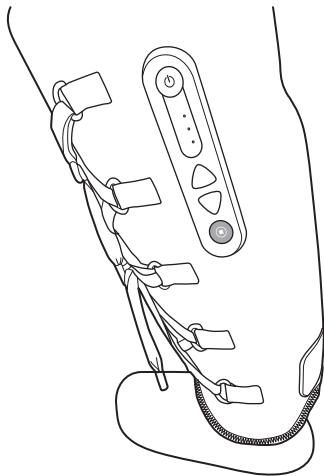


定格・LR表示プレート

(例) 左足用を取り付け

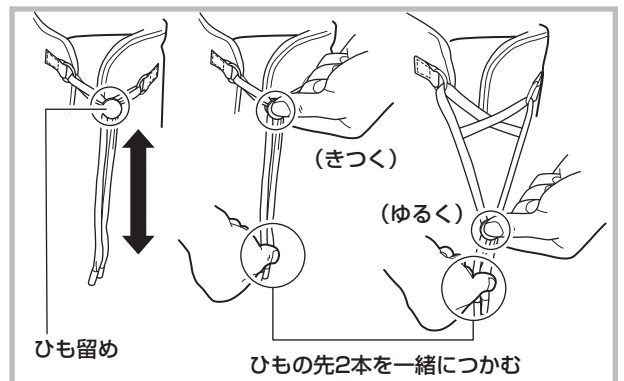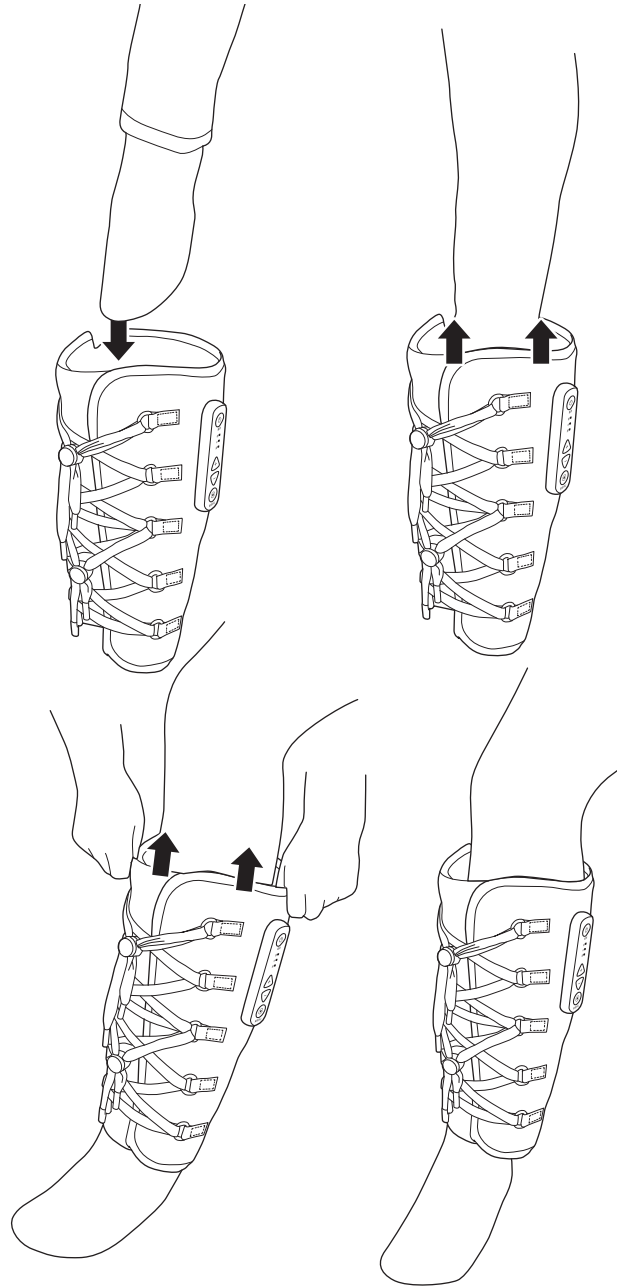

- きつすぎる場合はゆるめたり、強く使用したい場所は多少きつく取り付けるなど調節することができます。


 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 肌に使用跡が付くことがあるので、ズボンやくつ下（長めのソックス）をはいて使用する。肌に直接使用すると、使用跡が付くことがあり、使用跡はすぐになくならないことがあります。</li> <li>• 床や椅子に座って使用する。使用中は立ち上がらないでください。</li> </ul>
--	--


## 6. 同様にもう片足にも取り付ける

本機は左右独立しているのので、状況によって片足のみ使用することも可能です。

## 操作方法

### 1. 電源ボタンを長押しして運転を開始する

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 回の使用時間は 10 分以内にする。逆効果やけがの原因になります。</li> <li>• ふくらはぎ以外で使わない。本製品は足専用です。本来の使いかた以外の使用はしないでください。</li> <li>• 使用開始時は「弱」で使用する。十分慣れてから強くしていきましょう。</li> </ul>
---	---

 <b>警告</b>	<p>緊急時は<b>緊急停止ボタン</b>を押す。          エアーによって足を取り出しづらい状態でも、緊急停止ボタンを押すことにより、空気が抜けて足が取り出しやすくなります。</p>
--	--


### 2. +ボタン・-ボタンを押して、エア어의強さを調節する

+ボタン・-ボタンを押すことで、エア어의強さを調節することができます。必ず「弱」から使用し、慣れてきてから順に強さを調節します。  
 +ボタン・-ボタンを押すたびに、強さランプが変わります。

#### 自動オフタイマー

使いすぎや切り忘れを防止するためタイマーにより約10分で自動で停止します。

## 操作部

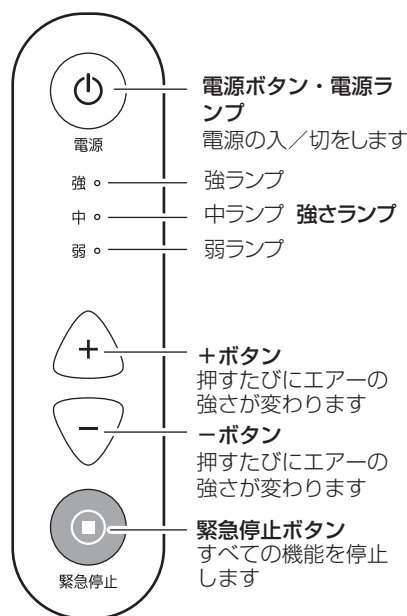

# 正しい使いかた（つづき）

## 3. 電源ボタンを押して動作を停止させる


- ※ 緊急停止ボタンを押すとすべての機能が強制的に終了します。本体は解放状態になります。
- ※ 使いすぎや切り忘れを防止するため、タイマーにより約10分で自動で停止します。



警告


- USBケーブルを接続したままにしない。絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
- USBケーブルはUSBプラグ部を持って抜き差しする。USBケーブルを持って引き抜いたりすると接続部に無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
- USBケーブルを巻きつけたまま使用しない。発煙・発火の原因になります。

## 操作部

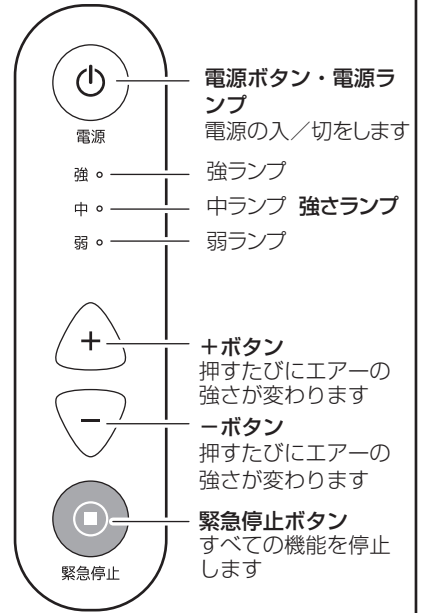

## 4. ファスナーを開いて本体を足からはずす

- ※ 足からはずしたあと、再度ファスナーをしめておいてください。

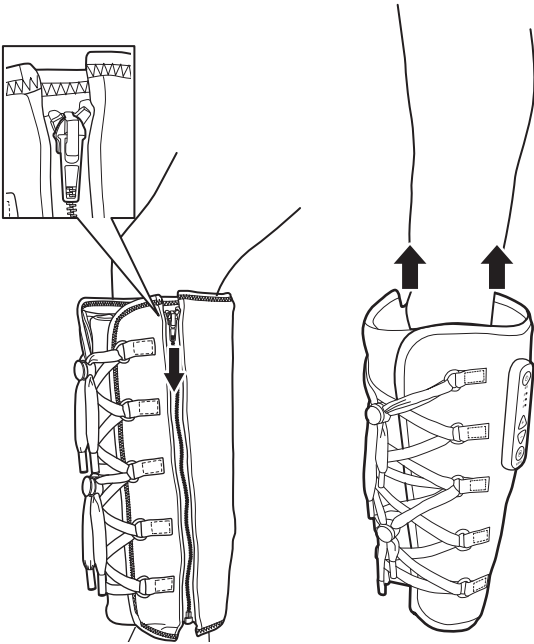



# お手入れと保存



お手入れの際は、電源を切り、本体の動作が停止したことを確認する。  
感電やけが、やけどの原因になります。

## お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。
- ・本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## 本体のお手入れ

アタッチメントのみ取りはずして洗うことができます

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。強くこすらないでください。傷つきや布が破損する原因になります。

## アタッチメントの取り付け

アタッチメントの形状は左右同じです。面ファスナーにて取り付けてください。



アタッチメントのお手入れで乾燥機・ドライクリーニングを使用しない。  
30°C以下の水で手洗いしてください。

付属品はドウシシャマルシェにて購入することができます。

アタッチメント	ピンク	型番AT-ISR-2301PK
(2枚組)	グレー	型番AT-ISR-2301GY
充電用USB-Cケーブル・ 専用ACアダプターセット		型番AD-ISR-2301

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**  
**DOSHISHA Marche**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで  
<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(➡裏表紙)へお問い合わせください。

## リサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています


通常のご家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になりました製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の分別方法に従ってください。


ドウシシャ福井家電カスタマーセンター(裏表紙参照)でも受け付けております。



Li-ion

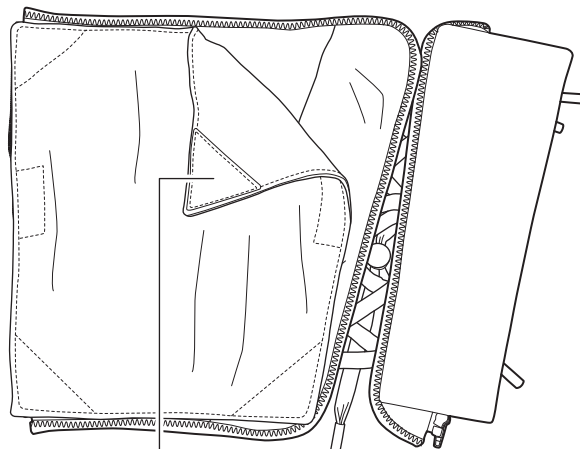

面ファスナー

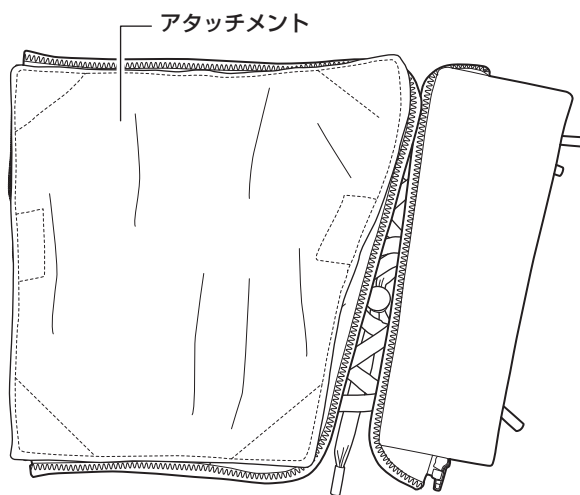

アタッチメント

## 保存のしかた

次の使用に支障のないように清掃し、ホコリが付かないようにビニール袋などに入れたあと、化粧箱に入れて、湿気の少ないところに保存してください。

# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	充電されていない	USB-C プラグを本体に取り付けて充電をする
	充電電池が劣化している	ドウシシャお客様相談室に相談してください
充電できない	本体のUSB-C端子に、専用USBケーブルのUSB-Cプラグが接続されていない	本体のUSB-C端子に、専用USBケーブルのUSB-Cプラグをしっかり差し込む
	充電している室温が低い、もしくは高いため正常な充電ができていない	室温が5°C~35°Cのところでの充電をする
	付属の専用ACアダプターを使用していない	付属の専用ACアダプターで充電をする
動作時間が短い	十分に充電されていない	十分に充電をする
	充電電池の寿命	ドウシシャお客様相談室に相談する
運転中に停止した	タイマーによって約10分で自動で停止します	1回の使用は10分以内とし、同一箇所への連続の使用は避けてください
エアーが抜けにくい	運転が継続している	緊急停止ボタンを押して運転を止める
音がする、音大きい	構造上、音が発生するものなので、故障ではありません	そのままご使用ください
充電中など本体部分が熱を持つ	内蔵の充電電池が熱を持つことによるものです	通常は問題ありません 異常な熱さを感じる時は充電をやめてください

## 長年ご使用の場合はよく点検を

### このような症状はありませんか？

- USBケーブルやACアダプターが異常に熱い。
- ケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

# 仕 様

## 仕 様

型番	ISR-2301
電気定格	AC100V 50/60Hz 6.63W
使用電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 1800 mAh
定格消費電力	DC3.7 V 4.7W
充電時間／運転時間	約4.0時間／80分 (室温 25℃)
タイマー	10分 自動 OFF
電源コード長さ	約 70 cm
外形寸法	幅 約 34 × 奥行 49 × 高さ 4 cm (片足)
質 量	約1.4 kg (ACアダプター、USBコード含む)
材 質	本体：表生地・裏生地 ポリエステル 100% アタッチメント：ナイロン 80%、ポリウレタン 16%
エア圧力	最大 84.9 KPa
対応サイズ	ふくらはぎ周囲 約 28～40 cm
付 属 品	アタッチメント×2 (装着済)、ひも×2 (装着済)、ひも留め×2 (装着済)、専用ACアダプター、専用USB-Cケーブル、取扱説明書・保証書

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

製品についてのご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<https://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance/>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>

